



waterpik® waterflosser®

QUICK START GUIDE WP-150 Series


1 First Use

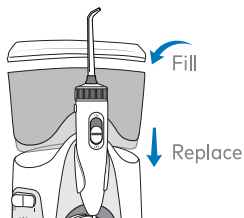

Fill reservoir with warm water and replace it firmly on the base.

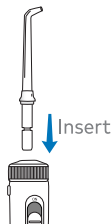

Insert tip firmly until it clicks into place.

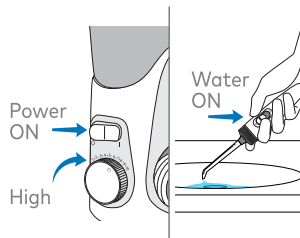


Turn pressure to high, point tip into sink. Turn Power switch ON and water switch ON until water flows. Turn OFF.


2 Water Floss



With power OFF and water switch in OFF position, place tip in mouth. Turn power ON. Turn water switch to ON.

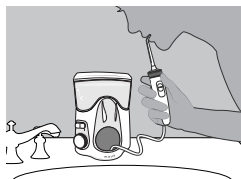

Lean over sink. Close lips enough to prevent splashing, while still allowing water to flow from mouth into sink.

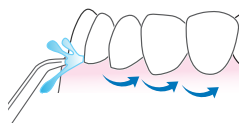


Aim water at the gumline at a 90 degree angle. Follow the gumline and pause briefly between teeth.

TO AVOID MESS: KEEP TIP IN MOUTH WHILE UNIT IS ON.


waterpik® waterflosser®

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR WP-150 Serie


1 Primer Uso

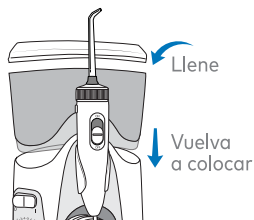

Llene el depósito con agua tibia y vuelva a colocarlo firmemente en la base.

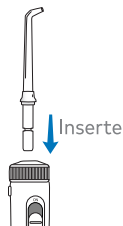


Inserte el cabezal con firmeza hasta que encaje en su lugar.

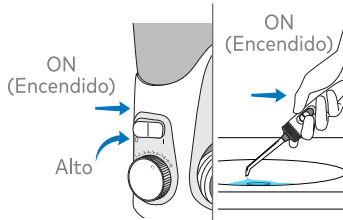


Gire la presión a alta; apunte el cabezal hacia el lavabo. Encienda el interruptor de encendido (ON) y el interruptor de agua (ON) hasta que el agua fluya. Apague la unidad (OFF).


2 Irrigación bucal

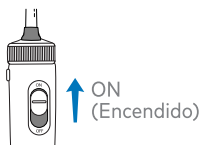

Con la energía apagada y el interruptor de agua en la posición APAGADO (OFF), coloque el cabezal en la boca. Encienda la unidad (ON). Encienda el interruptor de agua (ON).

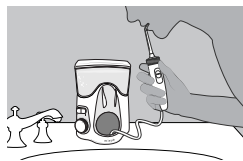

Inclínese sobre el lavabo. Cierre los labios lo suficiente como para evitar salpicaduras, mientras sigue permitiendo que el agua fluya de la boca al lavabo.

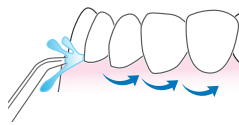

Dirija el agua hacia la encía en un ángulo de 90°. Siga la línea de las encías y haga pausas breves entre los dientes.

EVITE DERRAMES: COLOQUE EL CABEZAL EN LA BOCA ANTES DE ENCENDER LA UNIDAD